

Siamo un'azienda che esporta
in 80 paesi con certificati e
brevetti internazionali basati
sulla tecnologia medica
pneumatica leader dal 1986.



DVT-4000S

Sistemi Smart di Prevenzione DVT

Modalità automatiche

Il programma ottimale di prevenzione della TVP parte automaticamente premendo il comando "Start" sul touch screen. Il sistema controlla automaticamente che le condizioni della pompa, dei tubi e dei tutori connessi siano normali per procedere.



Awio Automatico



Auto Riconoscimento



Programma Automatico

- + Display 7" full touch
- + Compressione Simultanea e sequenziale
- + Intervallo di riempimento standard, 28 sec
- + Opzionalmente impostabile in ART "Auto Refilling Time"
- + Sistema automatico di controllo all'avvio delle procedure
- + Switch automatico in modalità batteria
- + Auto registrazione per ID paziente
- + Settaggi di sistema
- + Controlli di manutenzione automatica e calibrazione
- + Gancio da letto regolabile
- + Allarmi di sistema visivi e sonori
- + Batteria integrata con durata da 6 ad 8 ore

Impostazioni manuali

Queste impostazioni manuali sono molto utili quando è necessario regolare un programma specifico in base al tipo di corpo del paziente, ad una patologia, all'età o quando sono richiesti registri di utilizzo.

Settaggi Individuali Manuali

Monitoraggio Paziente Individuale

Tempo Riempimento Individuale

Settaggio Manuale Individuale

La pressione, il tempo di riempimento e di utilizzo possono essere impostati manualmente a seconda delle caratteristiche fisiche e patologiche del paziente.



Monitoraggio Individuale del Paziente

ID Paziente individuali vengono registrati offrendo uno storico dell'utilizzo del dispositivo completo di data, ora e tipo di protocollo.

Tempo di Riempimento Individuale

Quando l'ART è impostato su "on" il sistema attiva la rilevazione individuale automatica del tempo di riempimento e attiva la compressione alternata anziché simultanea.



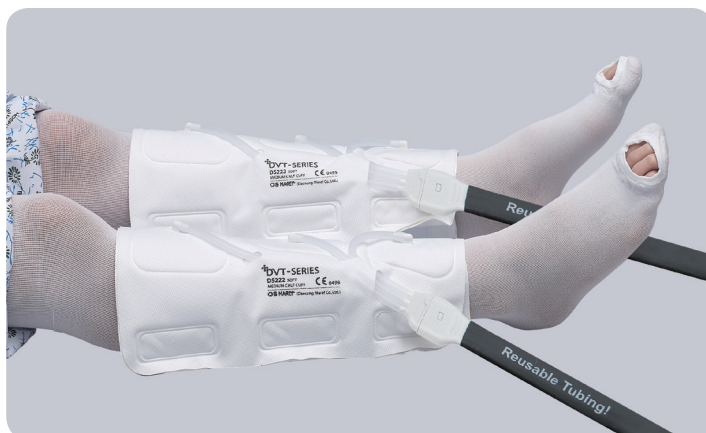


Tutori Morbidi e freschi per la DVT-4000s

I tutori Soft Cooling per la DVT-4000s sono sviluppati con un design orientato al paziente e con materiali eco-sostenibili in modo che tutti i pazienti possano usarli in modo confortevole e sicuro

Siamo orgogliosi di offrire ai pazienti una sensazione di morbidezza superiore, materiali ecocompatibili, attacchi precisi e un design con bordi morbidi. Tutti i tutori sono compatibili con DVT-4000s, DVT-2600 e DVT Pro.

I tutori riutilizzabili opzionali possono essere utilizzati con DVT-Pro per eventuale utilizzo domiciliare.



Tutore Polpaccio

Tipologie di tutori

- + Tutori in tessuto non tessuto: Coscia, ginocchio, piede e stivale
- + Tutori Soft: Coscia, ginocchio, piede e stivale
- + Tutori riutilizzabili: Ginocchio con connettore ginocchio

Eco Friendly

Senza PVC
Senza Latex
Senza Ftalati

Qualità durevole

Test di durata fino a 2 mesi. Minimo
10-14 giorni per pazienti critici e fino a 2
mesi per pazienti ad alto rischio
(es. THA, TKA, HFS)

Materiali morbidi

Tessuto interno ed esterno
e film interno morbido

Modellabile

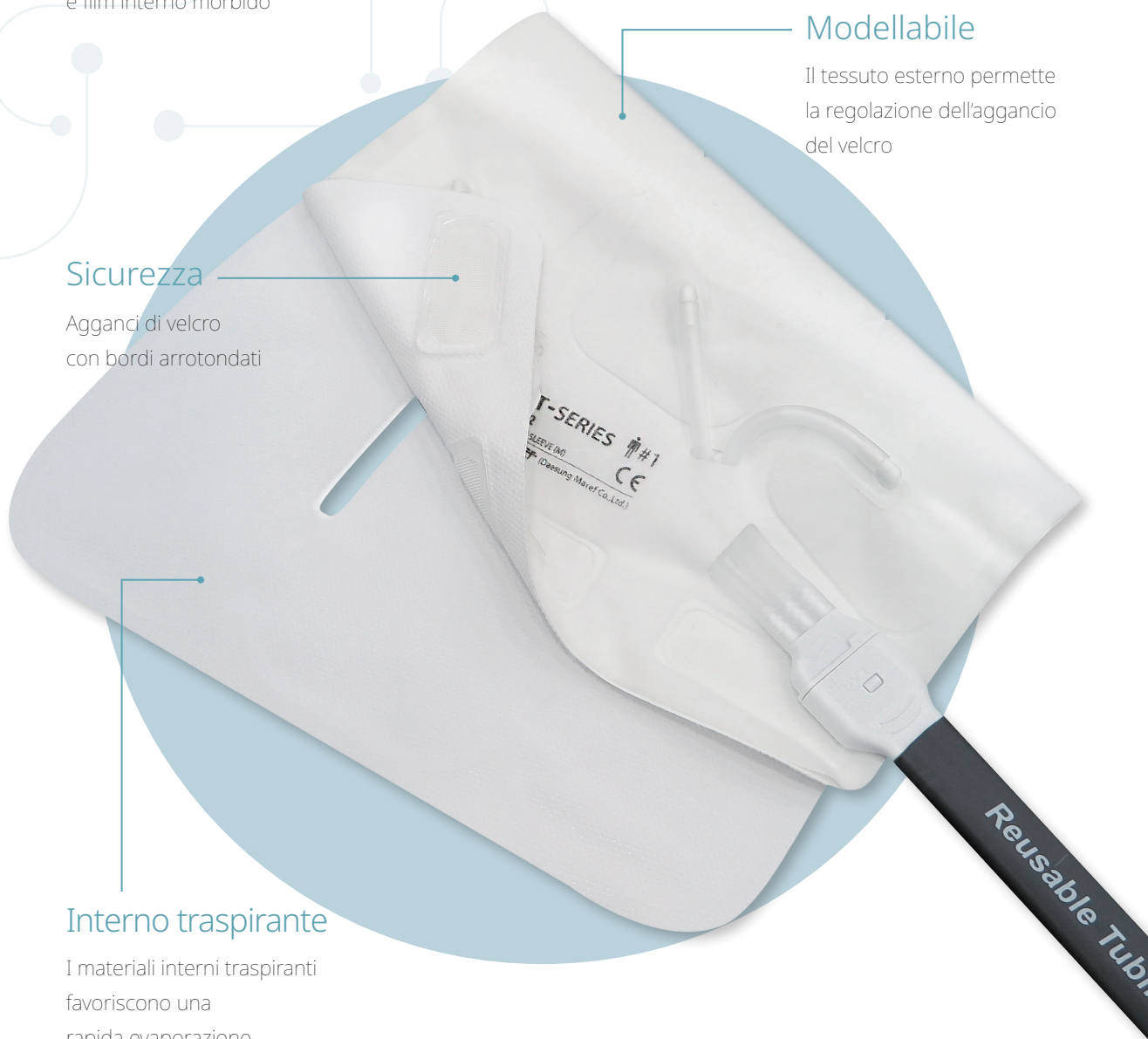
Il tessuto esterno permette
la regolazione dell'aggancio
del velcro

Sicurezza

Agganci di velcro
con bordi arrotondati

Interno traspirante

I materiali interni traspiranti
favoriscono una
rapida evaporazione



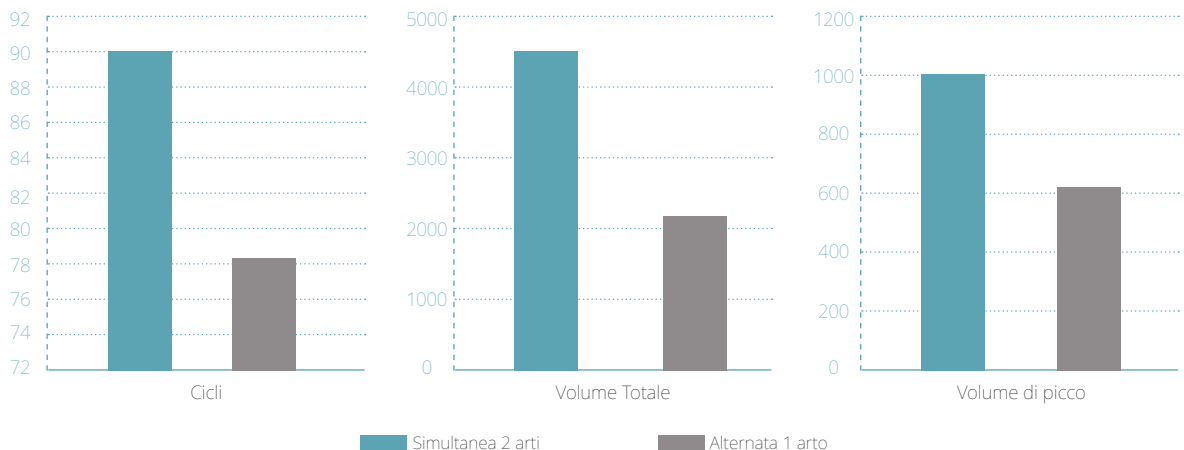


DVT-4000s Protocolli Smart Ottimizzati

- + Compressione simultanea
- + Tempo di rilascio: 12 secondi
- + Tempo di riempimento: 28 secondi
- + Gradiente pressorio: 45/40/35 mmHg



Comparazione degli effetti emodinamici
della compressione pneumatica simultanea
e alternata bilaterale e la tromboprofilassi
dopo un'artroplastica totale di ginocchio



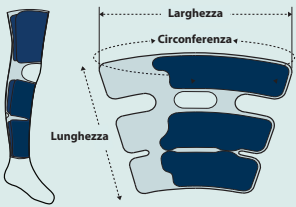
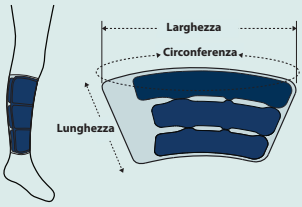
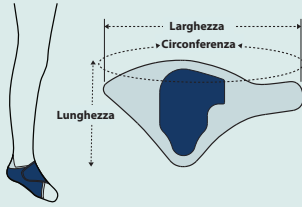
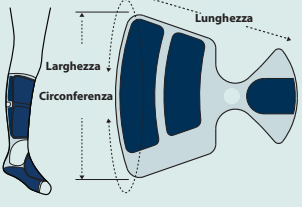
Sage international Magazine

<http://cat.sagepub.com/content/early/2014/01/07/1076029613518366>

U.S. National Institutes of Health

(The National Institutes of Health (NIH) is the primary agency of the United States government founded in the late 1870s

Dimensione Tutori

Tipo Tutore	Larghezza	Circonferenza	Lunghezza	Taglia	Codice	
 [TUTORE COSCIA]	S < 60cm (24")	S < 54cm (21")	S < 55cm (22")	S	DS011	Tessuto non tessuto
				M	DS012	
	M < 75cm (30")	M < 69cm (27")	M < 64cm (25")	L	DS013	
				XL	DS014	
	L < 93cm (37")	L < 87cm (34")	L < 67cm (26")	S	DS211	Soft
				M	DS212	
				L	DS213	
	XL < 113cm (44")	XL < 107cm (42")	XL < 67cm (26")	XL	DS214	
	< 80cm (31")	< 71cm (28")	< 63cm (25")	M	DS111	Oxford
 [TUTORE POLPACCIO]	S < 50cm (20")	S < 45cm (18")	S < 31cm (12")	S	DS021	Tessuto non tessuto
				M	DS022	
	M < 62cm (26")	M < 55cm (22")	M < 36cm (14")	L	DS023	
				XL	DS024	
	L < 77cm (30")	L < 70cm (28")	L < 38cm (15")	S	DS221	Soft
				M	DS222	
				L	DS223	
	XL < 97cm (38")	XL < 84cm (33")	XL < 38cm (15")	XL	DS224	
	< 66cm (26")	< 60cm (24")	< 35cm (14")	M	DS121	Oxford
 [TUTORE PLANTARE]				M	DS031	Tessuto non tessuto
	< 42cm (17")	< 35cm (14")	< 23cm (9")	XL	DS033	
				M	DS131	Oxford
 [TUTORE STIVALE]				M	DS041	Tessuto non tessuto
	< 64cm (25")	< 56cm (22 7/8")	< 71cm (28")	M	DS241	Soft
				M	DS141	Oxford